



TRATAMENTE RAPIDE 7-15 MIN/SEDINTA

DESCOPERA SECRETUL UNUI CORP FRUMOS SI TONIFIAT
RADIOFRECVENTA MONOPOLARA & LASER LIPOLITIC

TRATAMENT BI-FAZIC DE SLABIRE & REMODELARE
TRATAMENT PENTRU BARBIE DUBLA

Tratamentul cu X-Slim elimina grasimea nedorita si tonifiaza corpul fara a fi necesara o interventie chirurgicala. Adauga valoare salonului tau si ofera clientilor un tratament de slabire unic, eficient, fara durere.

SINERGIA CELOR 2 TEHNOLOGII


Laser Lipolitic si Radiofrecventa Monopolara ofera o solutie rapida pentru tratarea zonelor cu tesut adipos in exces si a zonelor cu laxitate tegumentara.

LASERUL LIPOLITIC


Reprezinta solutia in ceea ce priveste tratarea tesutului adipos, cat si a celulitei. Este o terapie ce poate inlocui liposuctia chirurgicala, actioneaza focalizat la nivelul celulei grase prin diminuarea in volum a acesteia datorita efectului de lipoliza, proces natural de ardere a grasimilor.

RADIOFRECVENTA MONOPOLARA

Este recomandata in terapii corporale deoarece genereaza efecte precum: reducerea grasimii printr-un proces celular numit apoptoza adipocitara, accelereaza metabolismul celulelor grase, reduce nodulii de celulita, favorizeaza drenajul limfatic, activeaza circulatia sangvina si creste gradul de fermitate si elasticitate al pielii. Are efecte benefice in ameliorarea aspectului vergeturilor.

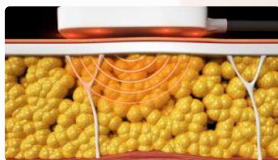

Radiofrecventa monopolara 1 Mhz are o arie mare de propagare a caldurii, genereaza un punct termic ridicat profund la nivelul tesutului adipos.

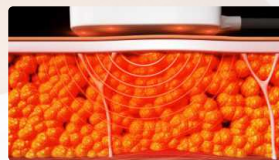

Controlul temperaturii in timp real: livrarea energiei este ajustata si focusata automat pentru a genera temperatura terapeutica de >45°C la nivelul tesutului adipos.



La 12 saptamani dupa tratament remarcam o scadere considerabila a tesutului adipos de peste 24%.



Reducerea grasimii prin apoptoza celulara generata de radiofrecventa monopolara.



24% din celulele grase sunt eliminate definitiv.



Procesul de eliminare a rezidurilor metabolice se produce natural, treptat in cca 12 saptamani fara a afecta metabolismul.

APLICATORII X-SLIM

11 capete de tratament cu dimensiuni diferite, ce permit tratarea mai multor zone.



4x Aplicatori mari - corporal



6x Aplicatori medii - corporal



1x Aplicator - facial
3 capete interschimbabile

TRATAMENTE EFICIENTE

- **Facial:** lifting facial si in zona perioculara, diminuarea ridurilor, reducerea barbiei duble, conturarea liniei mandibulare.
- **Corporal:** tratarea laxitatii tegumentare, diminuarea tesutului adipos, cresterea gradului de fermitate si elasticitate al pielii, ameliorarea spasmului muscular si cresterea circulatiei localizate.

1 tratament la 2 saptamani. Sunt necesare 6-8 sedinte de tratament.

AVANTAJELE X-SLIM

- Interfata intuitiva usor de utilizat ce permite schimbarea lungimilor de unda pentru personalizarea tratamentelor: 448 kHz, 500 kHz, 532 kHz, 615 kHz, 680 kHz, 1MHz
- Aplicatorii faciali permit realizarea tratamentelor pentru barbie dubla in doar 5 minute
- Sistem de control al temperaturii ce monitorizeaza atent temperatura epidermului. Inlatura discomfortul si riscul de producere a arsurilor.
- Disconfort minim, fara perioade de recuperare. Nu implica actiunea directa a terapeutului.

Timp scurt de tratament - tratamentul dureaza doar 15 minute /sedinta/zona

STEP BY STEP

CORPORAL

- Pregatirea zonei de tratament (indepartare metal, ras zona cu pilozitate mare)
- Selectarea si fixarea aplicatorilor (se aplica foaie de contact unica, se fixeaza aplicatorii cu un film osmotic)
- Se selecteaza parametrii si se incepe tratamentul. Aplicatorii actioneaza independent timp de 15 minute, fara interventia terapeutului.
- La finalul tratamentului se indeparteaza filmul osmotic, aplicatorii cu laser si radiofrecventa si foaia de contact. Se curata zona cu un servetel umed.

FACIAL

- Pregatirea zonei de tratament (demachiere, exfoliere blanda, crema de masaj/foita de contacta daca este necesar)
- Selectia aplicatorilor, in functie de zona tratata.
- Realizarea tratamentului timp de 5-7 minute.
- Se indeparteaza crema/foita de contact, se aplica o masca faciala.
- La finalul tratamentului se aplica o crema cu factor de protectie si o crema pentru zona perioculara.

REZULTATE DOVEDITE CLINIC



Inainte

La 4 saptamani
dupa 1 tratament



Inainte

La 5 saptamani
dupa 1 tratament



Inainte

La 8 saptamani
dupa 1 tratament



Inainte

La 6 saptamani
dupa 1 tratament