



# COROMEA™

Laser Ablativ CO<sub>2</sub>  
Cristal Fractionat



m'onduniq®  
cosmétiques professionnels

# COROMEA™

## Laserul fracționat ablativ (CO<sub>2</sub>) oferă una dintre cele mai eficiente terapii pentru piele.

LASERUL COROMEA FUNCȚIONEAZĂ PRIN CREAREA DE MICROCOLOANE DE ABLARE ÎN PIELE LA DIVERSE ADÂNCIMI ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI PE UNUL DINTRE CAPETE.

Totul depinde de setările și metoda de lucru. Aceste microcoloane ablativ de cristal provoacă leziuni termice și mecanice controlate ale pielii, ceea ce duce la contracția colagenului existent, precum și la reacția organismului la aceste leziuni, iar această reacție contribuie la formarea de colagen nou.

## INDICAȚIILE PENTRU TRATAMENTUL CU LASER FRACTIONAL ABLATIV COROMEA CO<sub>2</sub> SUNT FOARTE VARIATE.

De la toate tipurile de cicatrici post-traumatice, acneice și chirurgicale, trecând prin cicatrici hipertrofice până la lifting ablativ puternic, adică întinerirea pielii, lifting, efecte asupra pleoapelor inferioare și superioare, tratamente zonale pe corp cu capete fracționate și un cap de cristal cu vârful înlocuibile. Acest lucru permite un spectru larg de acțiune asupra vergeturilor, în mod ideal putem îngroșa pielea, putem efectua și microdermabraziune ușoară cu laser. În plus, vârful adecvat permite o lucrare precisă asupra diverselor leziuni ale pielii pe care dorim să le îndepărtăm.



Laserul Coromea acționează asupra imperfecțiunilor pielii, inclusiv riduri, linii fine, fotodeteriorare, decolorări de toate tipurile, leziuni ale pielii, culoare neuniformă, laxitate a pielii, precum și toate cicatricile, îndepărtarea alunițelor și leziunilor benigne ale pielii. Fiecare modificare necesită cunoștințe adecvate din partea operatorului laser.

**LASERUL COROMEA CO<sub>2</sub> CRYSTAL UTILIZEAZĂ O LUNGIME DE UNDĂ DE 10.600 NM, IDEALĂ PENTRU REGENERAREA MATRICIULUI DE COLAGEN ȘI ESTE ALEGEREA OPTIMĂ PENTRU UTILIZARE ÎN CAZUL UNOR PROBLEME ALE PIELII.**

Laserul permite tratamente fracționate, ablativ și nefracționate eficiente și de înaltă precizie, utilizând cea mai largă gamă de metode și o serie de parametri avansați și adecvați, precum și capete și vârful corespunzătoare.

Sarcina principală a laserului Coromea în timpul tratamentului este de a crea leziuni termice controlate în stratul bazic al epitelului pielii și de a reduce ridurile, decolorarea și cicatricile acneice. Laserul Coromea strânge și îmbunătățește densitatea pielii și contribuie, de asemenea, la producerea de colagen și elastină noi. Laserul cu cristal Coromea CO<sub>2</sub> utilizează una dintre cele mai bune lentile Cristal Mirror, componente de bază importate, cea mai bună tehnologie a lentilelor, funcționare sistematică și viteză fantastică, precum și o multitudine de opțiuni de setare a razei laser.

Acest lucru face ca laserul să fie foarte precis și exact și vă permite să lucrați asupra diverselor modificări, chiar și cele mai mici, inclusiv punctele mai mici, cu o dispunere uniformă a lucrării. Acest lucru oferă rezultate mai bune ale tratamentului, iar fiecare imperfecțiune, chiar și cea mai mică, este îmbunătățită și reepitelizată, de obicei în decurs de o zi. Acest lucru minimizează riscul de cicatrizare, infecție sau modificări ale pigmentării pe termen lung. Microcoloanele termice acționează la suprafața și în profunzimea dermei, ajungând la stratul subiacent al dermei și stimulând formarea colagenului.



# COROMEA™

În plus, acest mecanism permite tratamente foarte precise și extrem de personalizate pentru clienți.


De la toate tipurile de cicatrici post-traumatice, acneice și chirurgicale, trecând prin cicatrici hipertrofice până la lifting ablativ puternic, adică întinerirea pielii, lifting, efecte asupra pleoapelor inferioare și superioare, tratamente zonale pe corp cu capete fracționate și un cap de cristal cu vârfuri înlocuibile. Acest lucru permite un spectru larg de acțiune asupra vergeturilor, în mod ideal putem îngroșa pielea, putem efectua și microdermabraziune ușoară cu laser. În plus, vârfurile adecvate permit o lucrare precisă asupra diverselor leziuni ale pielii pe care dorim să le îndepărtăm.

## PE DIVERSE ZONE ALE CORPULUI, ADAPTÂNDU-LE LA NEVOILE FIECĂRUI CLIENT

Tehnologia fracționării cristaline determină eficacitatea și confortul tuturor tratamentelor cu laser și al refacerii suprafeței. Rejuvenarea fracționată implică emisia de fascicule minuscule de energie laser care pătrund în piele sub formă de coloane termice în derm, lăsând țesutul dintre ele intact sau „neprelucrat”. Energia laser este depusă în țesut sub formă de impulsuri aleatorii, alternând zonele tratate cu laser cu zone de piele intactă.

## ACEST LUCRU ASIGURĂ O REGENERARE MAI RAPIDĂ A ȚESUTURILOR ȘI ESTE O PROCEDURĂ PRACTIC INODORĂ.

De asemenea, trebuie menționat că laserul vă permite să setați diferite tipuri de lovituri în diferite forme și combinații.

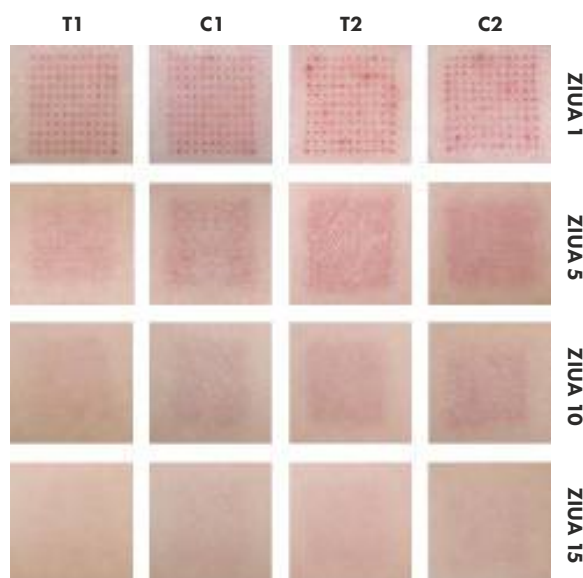

## BENEFICIILE COROMEA



### INDICAȚII MULTIPLE PENTRU TRATAMENTE

- Tratamente precise și rapide
- Eficacitate foarte ridicată a tratamentului
- Regimuri de tratament ajustabile pentru fiecare persoană
- Sigur pentru zonele delicate și sensibile
- Reglare flexibilă a dimensiunii zonei tratate, ideală pentru alunițe și leziuni cutanate izolate. Diferite capete suplimentare.



### EFFECT TERMIC RIDICAT ȘI TIMP DE RECUPERARE SCURT

- Rejuvenare a pielii (peeling superficial)
- Frațiune ablativă cristalină
- Stimularea colagenului
- Pentru riduri și linii fine
- Pentru cicatrici de acnee și alte cicatrici
- Cicatrici de la tatuaje sau îndepărtarea acestora
- Pentru textură neuniformă
- Pentru incizii precise și curate, cu sângerare minimă.
- Îndepărtarea cicatricilor: cicatrici de acnee, cicatrici de arsuri și cicatrici postoperatorii etc.
- Îndepărtarea localizată a diverselor leziuni cutanate



### SOLUȚII MINIM INVAZIVE ȘI INVAZIVE

- Cicatrici de acnee
- Liftingul pleoapei superioare
- Rejuvenare fracționată ablativă
- Riduri profunde
- Funcționare în mod fracționat



### VERSATILITATE ȘI PRECIZIE

- Oferim un confort sporit pacientului
- Mod de funcționare cu impuls unic
- Mod mixt și lucru suprapus
- Proces de asistență foarte bine pregătit în timpul și după procedura
- Mare versatilitate în lucru
- Scanner fracționat

# Tehnologie Coromea



Lifting puternic și mediu al pielii



Întărirea colagenului din țesuturi



Reducerea acneei și a altor cicatrici





Suport pentru tatuaje



Îndepărtarea leziunilor cutanate



Rejuvenare puternică a pielii

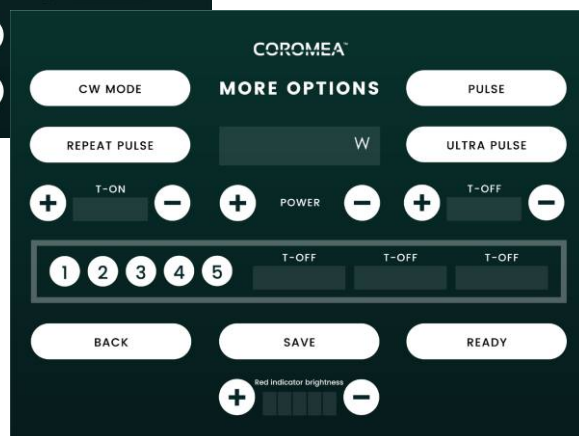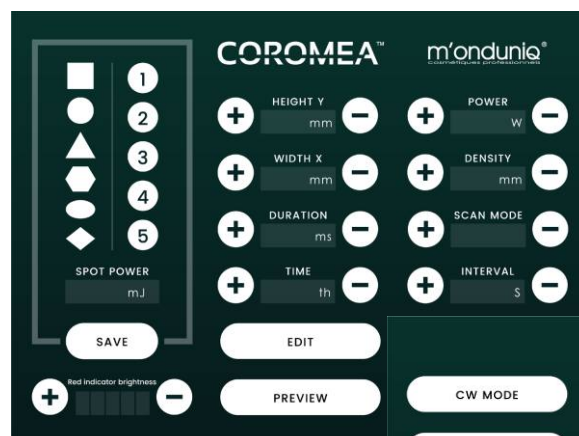

COROMEA CO<sub>2</sub> Cristal DOT Matrix interfață fracționată

# COROMEA™

## PARAMETRI TEHNICI

**Tensiune:** 230V/50Hz

**Lungime de undă:** 10600nm

**Putere pentru cap:** 1~60W

**Moduri de funcționare:** Mod fracționat și mod pulsant

**Domeniu de scanare:** max 20x20mm

**Puterea aparatului:** 1000w

**Braț articulată:** Braț cu 7 articulații. Rotire până la 360°

**Mod de scanare:** Midsplit, Aleatoriu, Normal, Diplo

**Scanner grafic:** dreptunghiular, triunghiular, rotund, hexagonal, eliptic, romb. Setări pentru orice dimensiune. Precizie punctuală

**Ecran:** touchscreen mare color cu ecran mobil și rotativ

**Mod de funcționare:** Scanare și cristal CO<sub>2</sub>

**Tip laser:** Laser fracționat cu cristal CO<sub>2</sub>

**Energie de ieșire:** 1-60W

**Scanare:** Diametru: 0,1-20 mm și Suprafață: 0,1x0,1 - 20x20 mm

**Cristal CO<sub>2</sub>:** Pulsat și puls continuu unic

**Lumină:** indicator luminos semiconductor roșu (650 nm)

**Sistem de control:** Microcomputer

**Transmisie optică:** Braț cu fibră optică

**Sistem de răcire:** Răcire cu circuit intern închis

## LASER-IQ COSMETICE PROFESIONALE



**LASER-IQ Calming Repair Serum 25ml**  
Cocktail funcțional reparator pentru pielea sensibilă



**LASER-IQ Calming Repair Cream 50ml**  
Cremă reparatoare funcțională pentru îngrijire la domiciliu după tratamente



**LASER-IQ Calming Repair Cream 150ml**  
Cremă reparatoare funcțională pentru pielea sensibilă și vascularizată



**LASER-IQ Hyaluronic Carbon Mask 50g**  
Mască purificatoare cu cărbune activ și acid hialuronic



**LASER-IQ Calming Biocellulose Mask 8ml**  
Mască calmantă și hidratantă din bioceluloză



**LASER-IQ Enzymatic Powder Peeling 30g**  
Pudră enzimatică pentru pielea sensibilă și vascularizată



**LASER-IQ Poudre Moussante 30g**  
Pudră curățătoare pentru pielea sensibilă și delicată



m'ondunio®  
cosmétiques professionnels

# COROMEA™

Laser Ablativ CO<sub>2</sub>  
Cristal Fractionat