



m'ondunio®
cosmétiques professionnels



INNARI

LIFTING NON-INVAZIV
EFECT „THREAD LIFT”
FĂRĂ ACE & CONSUMABILE



PRIMUL DISPOZITIV DIN LUME CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIA HTP

m'ondunio®
cosmétiques professionnels

O tehnologie similară, dar mai sigură și mai eficientă decât HIFU, care acționează la profunzimi similare. Pentru prima dată, putem pătrunde non-invaziv până la o adâncime de 4 mm, fără a fi necesare micro-începături sau puncții clasice, obținând efecte similare celor oferite de firele PDO, cu un efect IMEDIAT ce poate dura până la 3 ani după efectuarea unei serii de tratamente.

Netezirea și reducerea ridurilor:
riduri ale frunții, riduri de încruntare, „laba gâștii”, riduri periorbitale, pliuri nazolabiale, liniile marionetei, riduri ale gâtului și altele.

Reducerea vizibilității așa-numiților „obraji de hamster” și a pliurilor de la nivelul bărbiei

Creștere semnificativă a fermității și densității pielii

3 tehnologii într-un singur dispozitiv:
RF DEAP, RF și HIFU

Efect imediat și foarte puternic de tightening (strângere) a pielii


Adâncime de acțiune:
1.5mm, 2.5mm
4.0mm

Îmbunătățire semnificativă a conturului facial pierdut

Răcirea stratului exterior al epidermei în timpul procedurii



ECHIPAMENTUL INNARI NU NECESITĂ CONSUMABILE

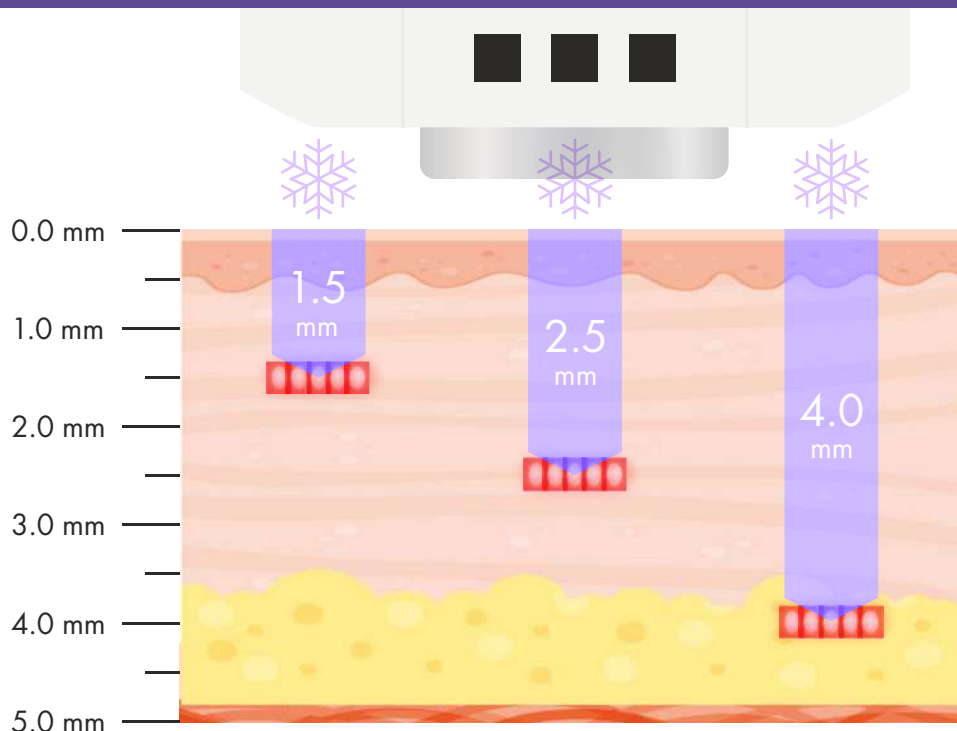

CUM FUNCȚIONEAZĂ?


În ultimii ani, specialiștii în chirurgie au observat, pe baza unui număr mare de proceduri clinice de lifting și de corectare a ridurilor, că efectul obținut prin tensionarea și pliarea stratului fascial de la nivelul periostului, urmat de ridicarea epidermei și a structurilor musculare, este semnificativ diferit și mai eficient. La nivelul feței există un strat fascial, denumit în medicină "fascia SMAS".

Tehnologia acestui dispozitiv acționează prin stimularea și contractarea fasciei SMAS, obținând astfel un efect de lifting al pielii din profunzime. Procedura este completată de tehnologia de răcire, ceea ce asigură un rezultat real, natural și de durată, cu menținerea efectului pentru o perioadă îndelungată.

SMAS RF:

utilizează tehnologia de radiofrecvență la 500 KHz, 750 KHz și 1 MHz.

Temperatura maximă RF: 100°C, combinată cu răcire până la temperatura minimă de -16°C. Această combinație face tratamentul mai confortabil, permite acțiunea în straturile profunde ale pielii, este non-invaziv și oferă un efect imediat vizibil.

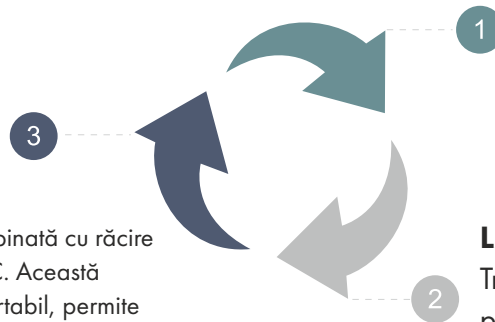

HIFU:

1. Tratamentul este dureros și nu foarte sigur.

LASER:

2. Tratamentul este dureros, poate provoca sângerare și nu este foarte sigur.

COMPARAȚIE	HIFU	LASER	SMAS RF
Adâncime de penetrare	1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 mm	Derm	1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm
Rezultatul tratamentului	Efectul imediat nu este evident, iar rezultatele vizibile apar după aproximativ 3 luni.	Efectul imediat este moderat, iar rezultatele devin vizibile după aproximativ o săptămână.	Efectul este imediat vizibil.
Zone de tratament	Zonele cu depozite adipoase la nivelul obrazilor.	Față - nu se lucrează în zona ochilor.	Față, gât, tâmples, bărbie și frunte.
Consumabile	Necesită consumabile.	Nu necesită consumabile.	Nu necesită consumabile.
Siguranță	***	****	*****

BENEFICIILE

Eficiență sporită: efect de anti-aging și remodelare a conturului facial prin acțiune asupra fasciei;


Siguranță crescută: adâncimi precise de acțiune – 1,5 mm, 2,5 mm și 4,0 mm – care vizează, respectiv, dermul superficial, dermul și fascia SMAS;

Anti-aging stratificat pătrunde la diferite niveluri ale pielii, stimulează producția de colagen necesară fiecărui strat și conduce, în final, la obținerea unui efect global de întinerire.

SMAS RF

m'ondunio®
cosmétiques professionnels

Dispozitiv de fermitate cu acțiune stratificată

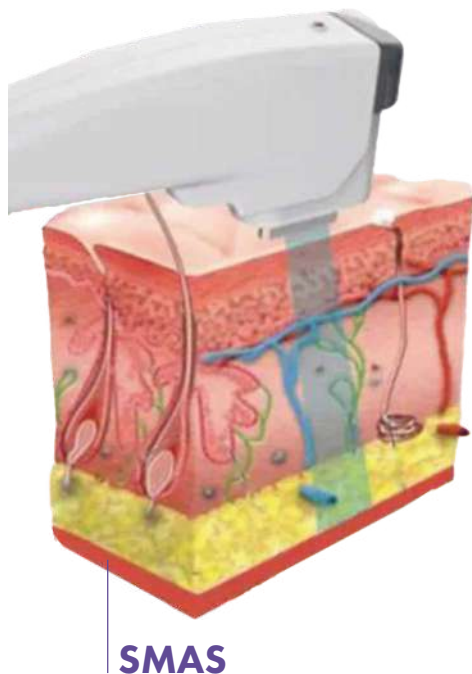

1.5 mm

Încălzirea superficială a pielii. Reduce ridurile. Efect anti-aging

Acționează precis asupra stratului superficial al dermului. Efectul termic determină contracția imediată a colagenului superficial și întărește structura pielii. După încălzirea dermului, este stimulată continuu regenerarea colagenului, pentru a reda elasticitatea pielii și a reduce ridurile.

2.5 mm

Încălzirea stratului mediu pentru fermitate și efect anti-aging

Acționează selectiv asupra stratului profund al dermului. Căldura declanșează procesele naturale de reparare ale dermului, stimulează producția de colagen, reorganizează fibrele de colagen și menține pielea fermă.

4.0 mm

Încălzirea profundă intensifică efectul anti-aging

Energia este aplicată precis la nivelul stratului SMAS, iar efectul termic stimulează regenerarea continuă a colagenului. Se formează astfel o nouă rețea de fibre elastice, care favorizează fermitatea și efectul de lifting al țesutului fascial profund.

REZULTATELE TRATAMENTULUI SMAS

EFFECT IMEDIAT

Pielea se tonifiază instantaneu, conturul feței devine mai bine definit, iar ridurile sunt estompate.

EFFECT PROGRESIV (ÎN TIMP)

Pielea devine mai luminoasă, mai fermă, mai netedă și mai elastică.

MAI SIGUR

Tehnologie non-invazivă, fără necesitatea anesteziei, sigură și fiabilă, fără consumabile.

PROTOCOL DE TRATAMENT SMAS

VÂRSTE	SETARE TRATAMENT	REZULTATELE TRATAMENTULUI
20 - 35 ani	10 aplicări / ședință 1 ședință la 15 zile	Pielea se va tonifia, conturul feței va deveni mai clar, textura pielii va fi mai fină, tenul mai uniform, iar ridurile fine vor fi netezite.
35 - 50 ani		Ridurile superficiale sunt estompate, pielea capătă un aspect mai ferm, iar semnele de îmbătrânire și textura pielii din zona nasului, colțurilor gurii și liniei mandibulare sunt vizibil îmbunătățite.
> 50 ani		Linia sprâncenelor este ridicată, laxitatea pleoapei superioare se reduce, iar pielea devine mai plină și mai elastică. Tenul își recapătă vitalitatea, privirea devine mai expresivă, iar aspectul tânăr se menține pentru o perioadă îndelungată.


STUDII CLINICE INNARI

PENTRU A MENȚINE CELE MAI ÎNALTE STANDARDE ȘI PENTRU A ASIGURA SATISFAȚIA 100%

FRUNTE ȘI BĂRBIE

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament


FRUNTE
BĂRBIE

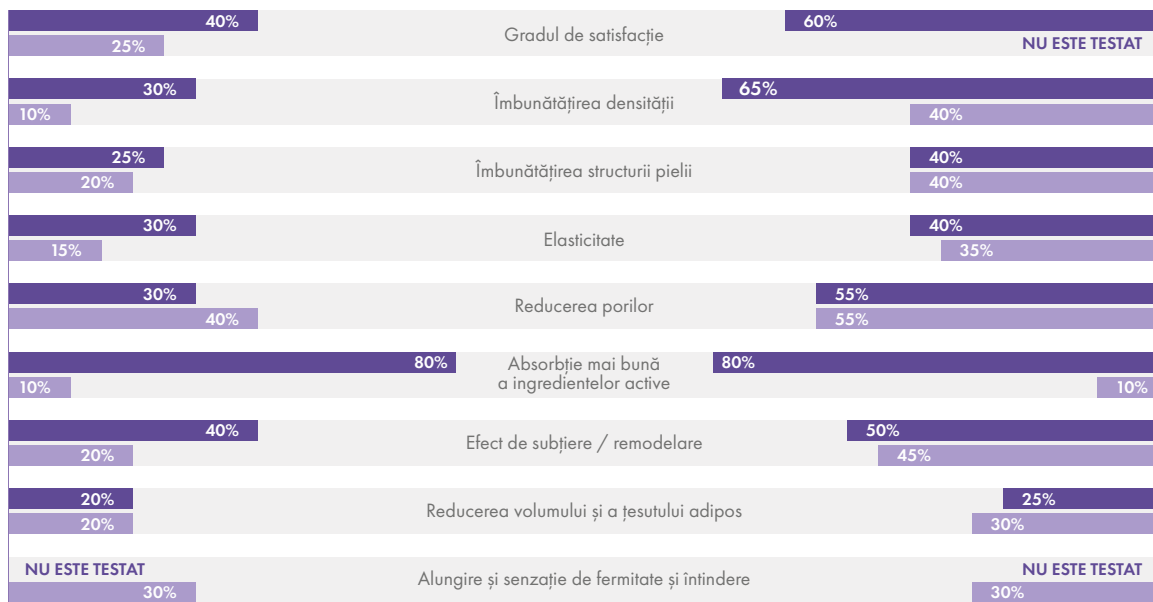

ZONA OCHILOR ȘI RIDURI PERIORBITALE


Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

ZONA OCHILOR
RIDURI PERIORBITALE

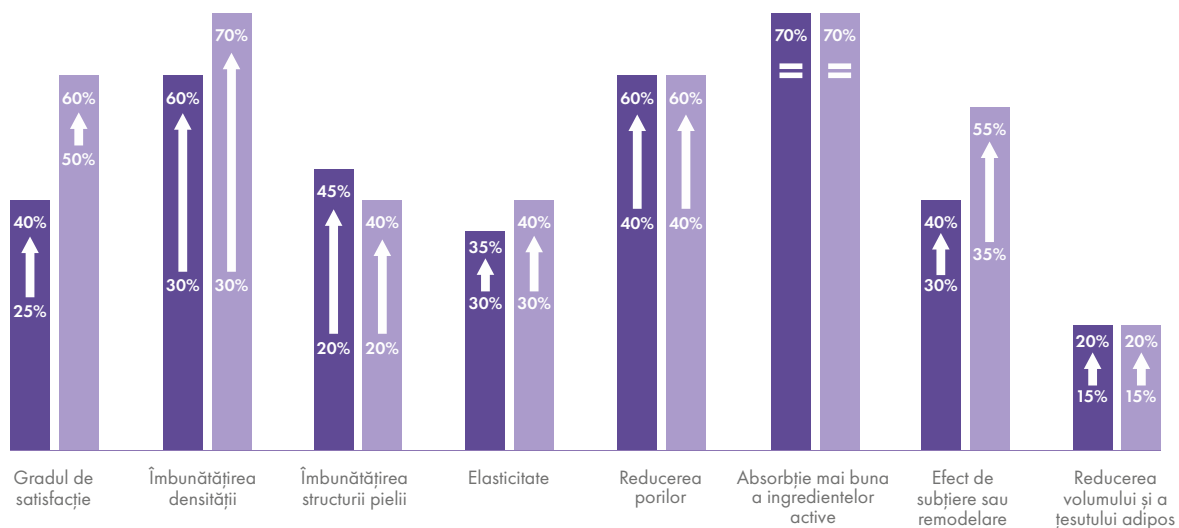


PLEOAPĂ SUPERIOARĂ

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

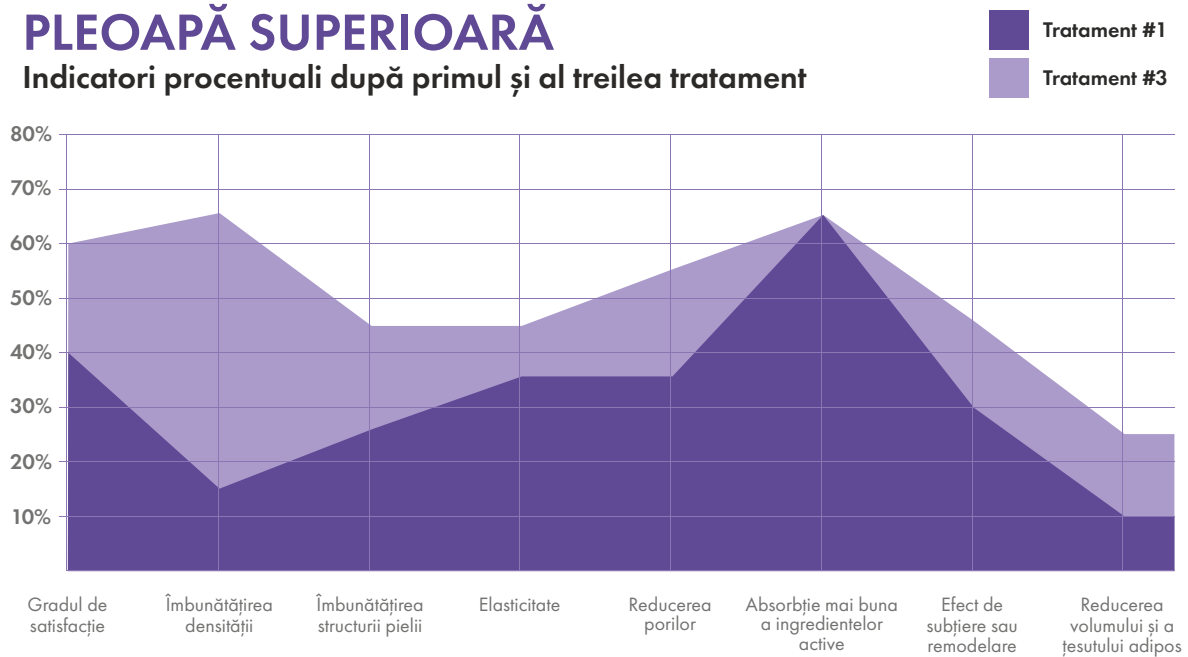


OBRAJI

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

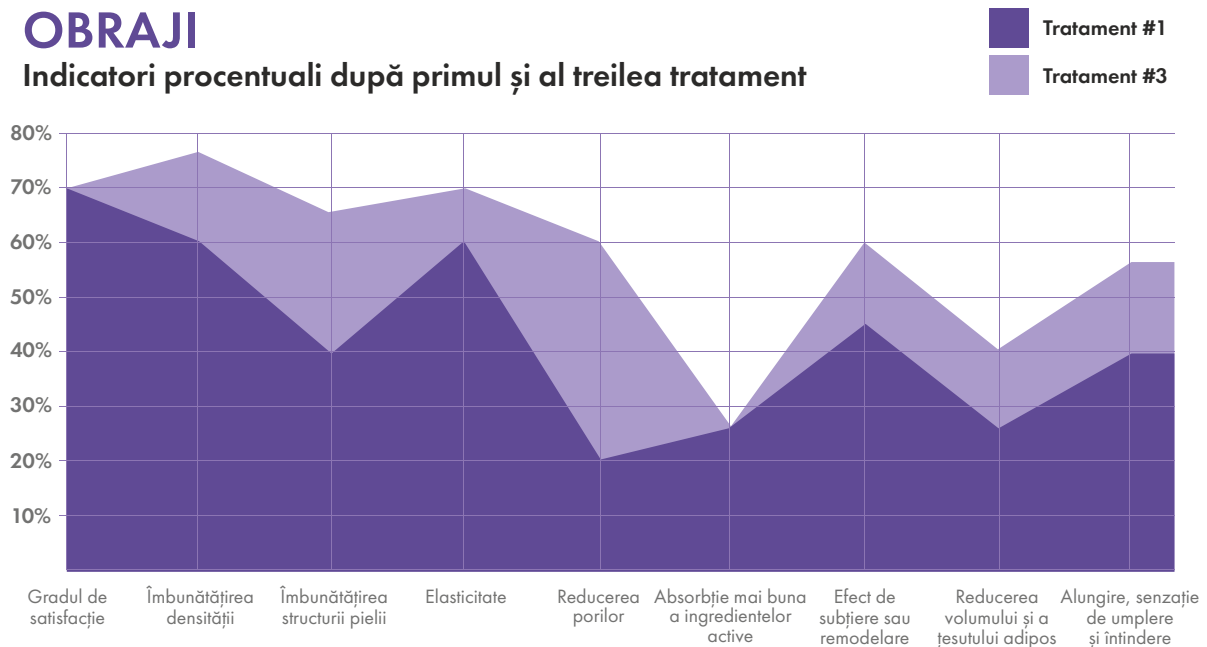


RIDURI LABIOMENTALE (MARIONETĂ)

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

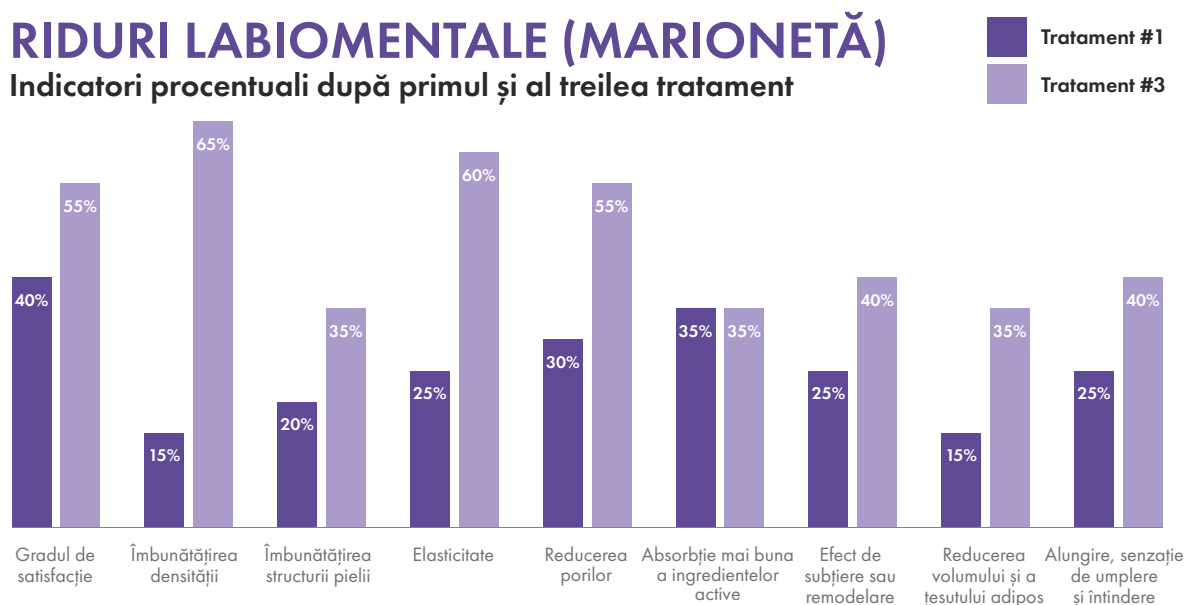


PLIUL NASOLABIAL

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

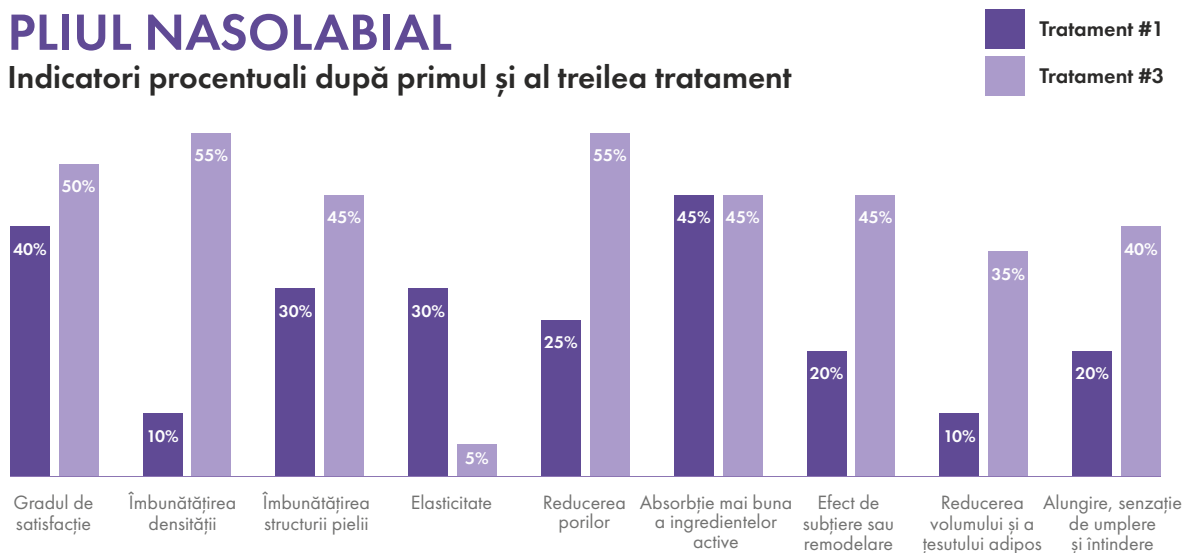


PERIORAL

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

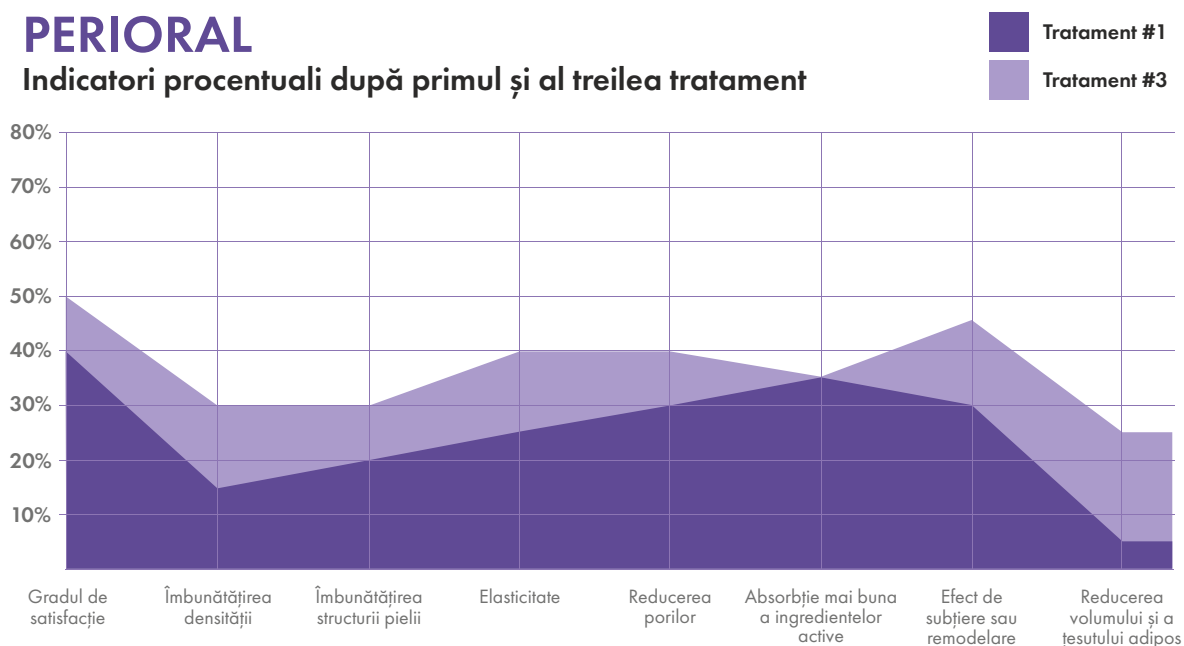

GÂT ȘI BĂRBIE


Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament

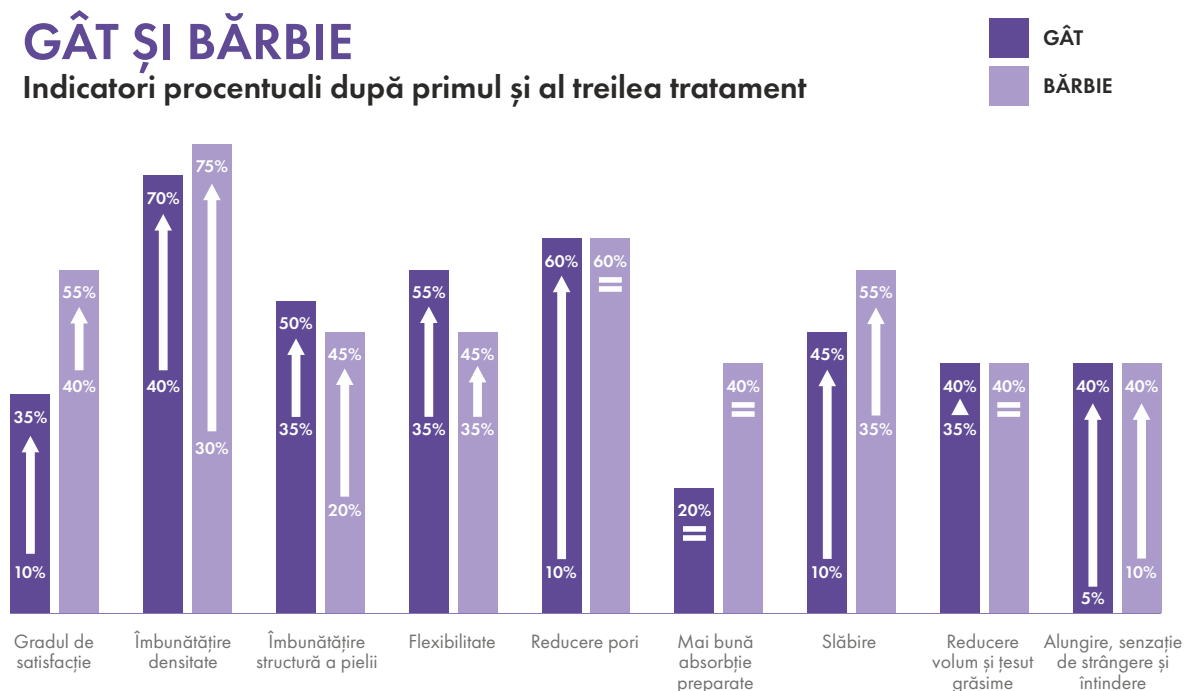

DECOLTEU ȘI NAS

Indicatori procentuali după primul și al treilea tratament


DECOLTEU
NAS

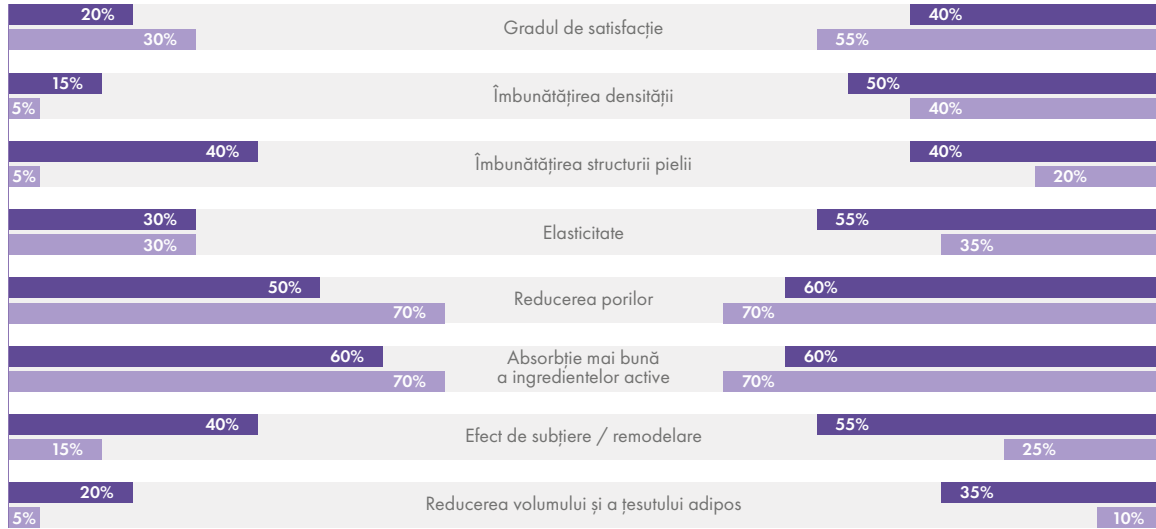

m'ondunie®
cosmétiques professionnels

INNARI

LIFTING NON-INVAZIV
EFFECT „THREAD LIFT”
FĂRĂ ACE & CONSUMABILE

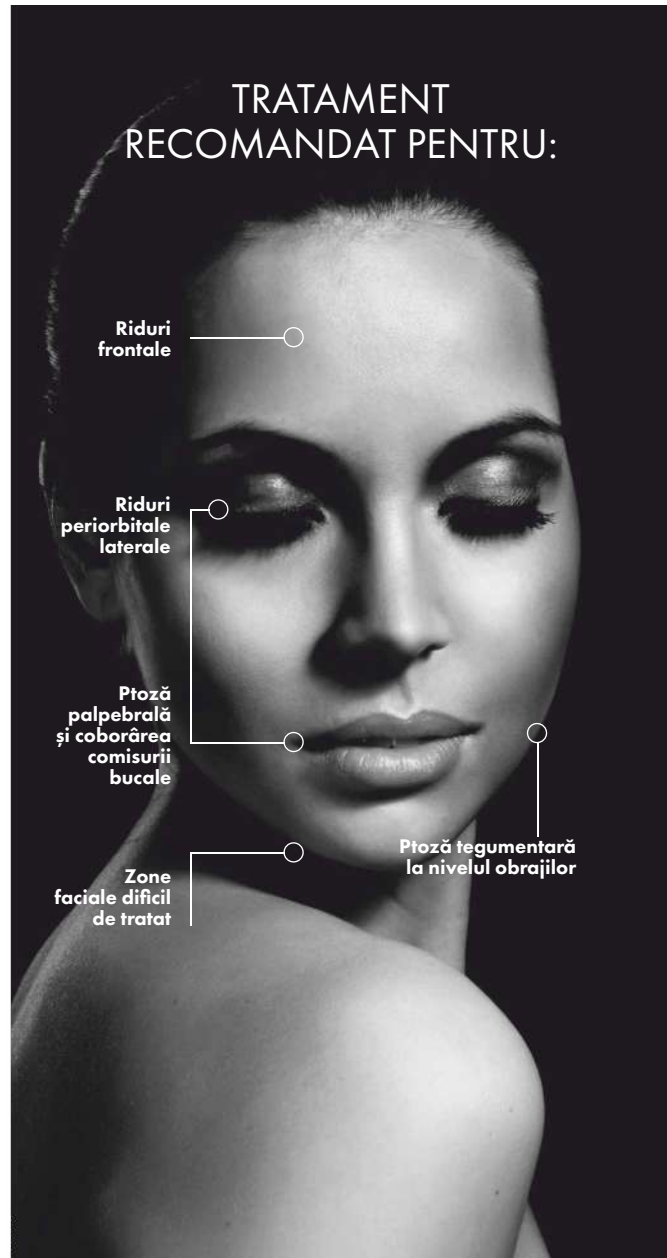

EFECTELE TRATAMENTULUI



Înainte



După



Înainte



După



Înainte



După



Înainte




După




Înainte



După

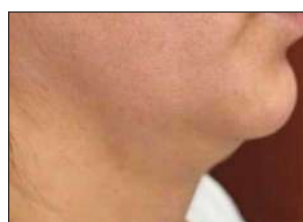

Înainte

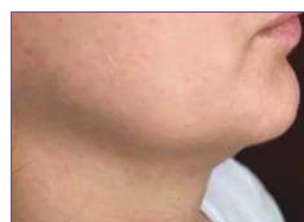

După



Înainte



După



Înainte



După

PARAMETRI TEHNICI

Ecran: ecran tactil de 10.4"

Control: control computerizat complet, bazat pe microprocesor

Verificare de siguranță: monitorizare online în timp real

Număr de piese de mână: 2 buc.

Suprafață de acțiune: 3,2 cm² / 2 cm²

Adâncime de acțiune: 1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm

Moduri de lucru: mod inteligent, mod personalizat (definit de utilizator)

Tensiune de alimentare: 220 V / 50 Hz

Putere de intrare: 500 VA

Greutate netă: 20 kg • **Greutate brută:** 25 kg

Dimensiuni aparat: 53 x 33 x 25 cm

Dimensiuni ambalaj: 68 x 49 x 46.5 cm

m'onduniq®
cosmétiques professionnels

INNARI

LIFTING NON-INVAZIV
EFECT „THREAD LIFT”
FĂRĂ ACE & CONSUMABILE