



# CRYO SCULPT

REMODELARE CORPORALĂ PRIN

**CRIOOLIPOLIZĂ AVANSATĂ**

Tehnologii patentate pentru confort, siguranță și eficiență





# CUM FUNCȚIONEAZĂ?


Aparatul de criolipoliză utilizează o tehnologie modernă de înghețare pentru a elimina excesul de grăsime subcutanată dintr-o anumită zonă a corpului. Tehnologia avansată de criolipoliză 360° îndepărtează grăsimea localizată prin înghețarea celulelor adipoase la temperaturi scăzute, fără a afecta țesuturile din jur.

Odată expuse la temperaturi scăzute, celulele adipoase se descompun în mod natural și sunt eliminate treptat prin procesele metabolice normale ale organismului. Datorită tehnologiei 360° Surround Cooling, aplicatoarele de răcire se adaptează diferitelor curbe și contururi ale corpului, de la zona bărbiei până la genunchi, oferind o remodelare corporală eficientă și non-invazivă.

Organismul este responsabil de eliminarea treptată a grasimilor prin procese metabolice normale, ceea ce face ca terapia să fie la fel de eficientă pe cât este de non-invazivă.

 Diversi aplicatori pentru orice zonă

 Mod de masaj patentat

 Mod patentat de preîncălzire pentru drenaj limfatic

 Schimbare rapidă și ușoară a aplicatorilor

 Tehnologie inovatoare de temperatură constantă

 Tehnologie de răcire circulară 360°



# CE ESTE CRIOLIPOREDUȚIA?



Studiile clinice indică, că în momentul tratării cu temperaturi scăzute a anumitor zone cu probleme, se produce inflamația grăsimii subcutanate și creșterea metabolismului bazal și astfel adipocitele sunt distruse. Apoptoza celulară elimină celulele anormale și surplusul de celule normale, fiind unica metodă care distruge adipocitele nechirurgical, țesutul adipos fiind eliminat ireversibil.

## EFICIENȚĂ

Cu un singur tratament, rezultatele vor fi vizibile după trei săptămâni de la începutul tratamentului și optime din următoarele 2 luni.

## NON-INVAZIVĂ. FĂRĂ INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ.

Reduce grăsimea subcutanată nedorită în anumite zone ale corpului folosind tehnologia de răcire controlată.

## NEDUREROS

În primele 5-10 minute de tratament, este percepută o senzație de frig intens, care dispare curând din cauza amortelii zonei datorată frigului.




# CRYO SCULPT




Este posibil să te confrunți cu grăsime persistentă, chiar și după exerciții fizice și dietă.



Aparatul de criolipoliză aspiră pielea și straturile subcutanate de grăsime.

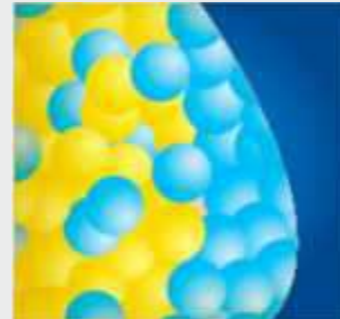

Energia de răcire îngheață depozitele de grăsime, inducând apoptoza.

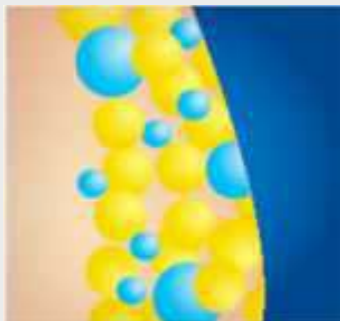

Celulele adipoase cristalizate sunt eliminate treptat prin metabolismul natural al organismului.



Stratul de grăsime rămas în zona tratată devine mai subțire și mai puțin dens.



Combină tratamentul cu un stil de viață sănătos pentru o siluetă mai suplă și mai armonioasă.

**360°C**

Răcire circulară

**-11°C**

Răcire maximă

**20%**

Aspirație mai puternică

**35%**

Reducerea grăsimii într-o singură ședință




# TIPURI DE APLICATORI



Monitorizare brevetată cu senzori dubli de temperatură, care garantează siguranță și eficiență.

## OPTIMIZAT PENTRU ORICE TRATAMENT

În urma unor teste și cercetări riguroase, fiecare aplicator de răcire a fost proiectat ergonomic pentru a se adapta fiecărei curburi a corpului. Aparatul de criolipoliză a fost optimizat pentru a obține rezultatele dorite, din cap până în picioare.

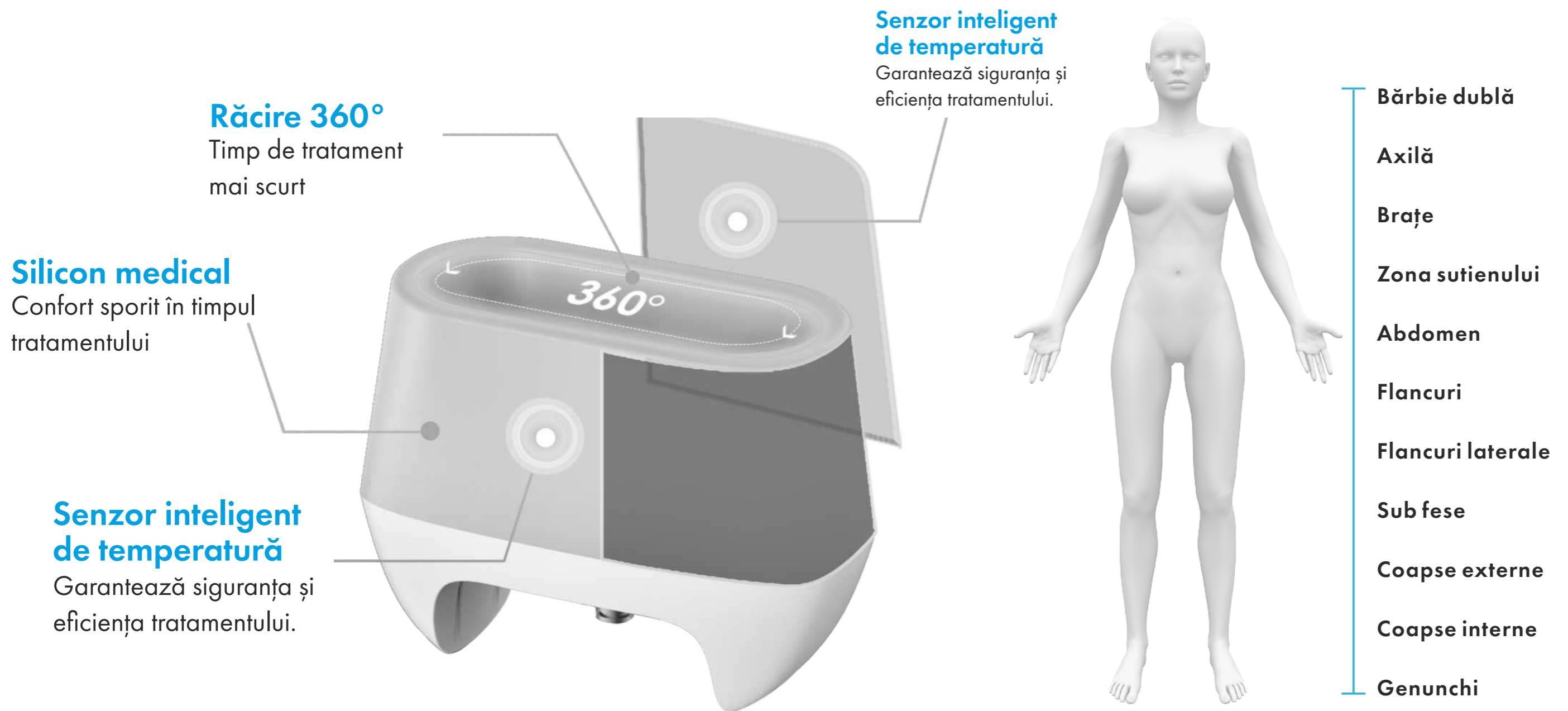


# TIPURI DE APLICATORI



Monitorizare brevetată cu senzori dubli de temperatură, care garantează siguranță și eficiență.


## SCHIMBARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ A APLICATORILOR

Prin mecanismul simplu press-and-release, aparatul de criolipoliză oferă utilizare comodă și permite schimbarea rapidă a aplicatorilor. Nu este necesară deconectarea cablurilor sau oprirea sistemului, chiar și în timpul tratamentului.

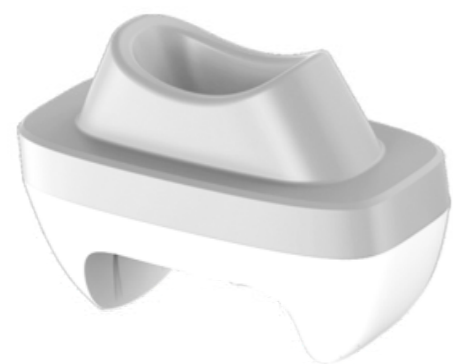

### WING MINI

Bărbie dublă,  
axilă, genunchi

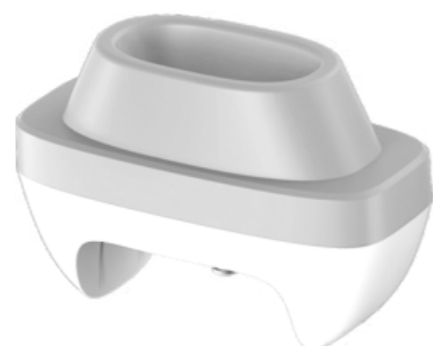

### FLAT MINI

Bărbie dublă,  
axilă, genunchi



### FLAT

Abdomen, brațe,  
coapse interne



### WING

Abdomen,  
flancuri, colăței



### WING PLUS

Abdomen, zona sutienului,  
flancuri, flancuri laterale, sub fese



### WING MAX

Abdomen, flancuri,  
flancuri laterale



### ARC-T

Coapse externe,  
coapse interne



# TIPURI DE APLICATORI



Monitorizare brevetată cu senzori dubli de temperatură, care garantează siguranță și eficiență.

## 8 METODE INOVATOARE PENTRU REDUCEREA CELULITEI ÎN SIGURANȚĂ ȘI CONFORT SPORIT



### APLICATOR 7-ÎN-1 CU DIMENSIUNI MULTIPLE

Design ergonomic, prietenos cu pielea, care se adaptează conturilor corpului. Permite tratarea eficientă a grăsimii localizate pe întregul corp, de la față până la picioare.

### CUPE DIN SILICON MEDICAL LSR FLEXIBIL

Cupe modelate integral cu răcire 360°, delicate și confortabile, oferind îngrijire completă pentru piele.




### TEHNOLOGIE INOVATOARE DE PREÎNCĂLZIRE

Sistem inteligent care încălzește zona înainte de răcire, relaxând țesuturile, stimulând circulația sanguină și asigurând un tratament sigur și confortabil.



### FUNCȚIE DE AUTOCURĂȚARE

Echipat cu sistem inteligent de autocurățare cu un singur buton după tratament, economisind timp și efort. Rezervorul filtrului extern poate fi îndepărtat ușor prin rotire manuală, fără a fi necesară demontarea aparatului.

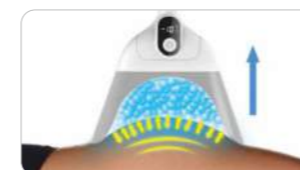

### MOD DE MASAJ BREVETAT

Simulează frecvența masajului manual, contractând și relaxând repetat mușchii, reducând tensiunea musculară superficială și stimulând circulația sanguină.




### TEHNOLOGIE DE TEMPERATURĂ CONSTANTĂ

Tehnologie dezvoltată pentru control precis al temperaturii și monitorizare inteligentă a variațiilor acesteia în timpul tratamentului.



### 20% MAI MULTĂ ASPIRAȚIE

Pompa de presiune negativă permite ajustarea intensității aspirației pentru tratamente personalizate și eficiente.

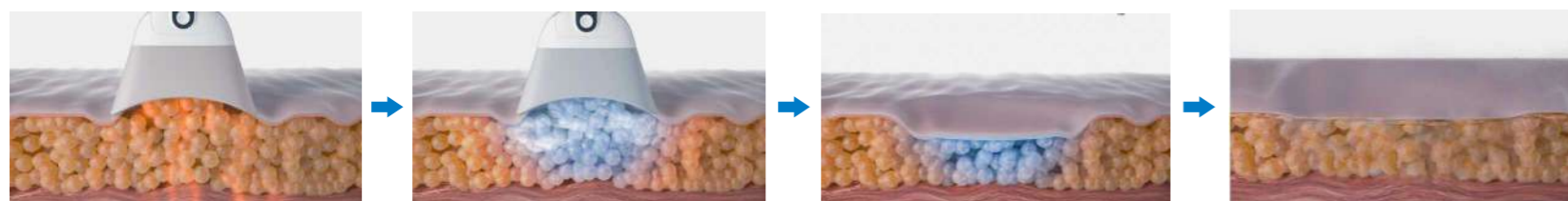

### CONTROL TEHNOLOGIC AVANSAT

2 motoare și 4 sisteme independente de control permit utilizarea capetelor de tratament simultan sau separat, cu putere mare și funcționare stabilă. Fiecare cap de tratament poate fi controlat individual, iar parametrii pot fi ajustați separat.

# TIPURI DE APLICATORI

Monitorizare brevetată cu senzori dubli de temperatură, care garantează siguranță și eficiență.





## TRATEAZĂ 4 ZONE SIMULTAN ÎN DOAR 40 DE MINUTE


Aparatul de criolipoliză este echipat cu o gamă extinsă de aplicatori, care facilitează obținerea unor rezultate semnificative chiar și în cele mai dificile zone de tratat.

## TEHNOLOGIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ PENTRU REZULTATE SUPERIOARE

Tehnologia îmbunătățită de răcire circulară 360° distribuie energia de răcire pe întreaga suprafață a aplicatorului, permițând atingerea mai rapidă a temperaturii optime de tratament și crescând eficiența cu până la 25%.

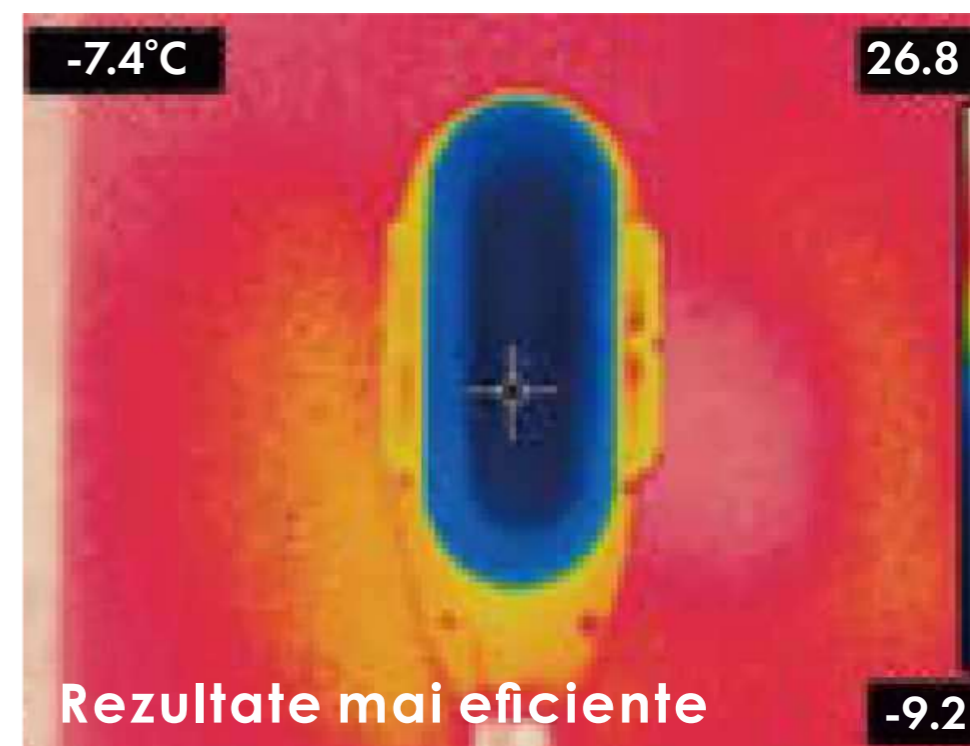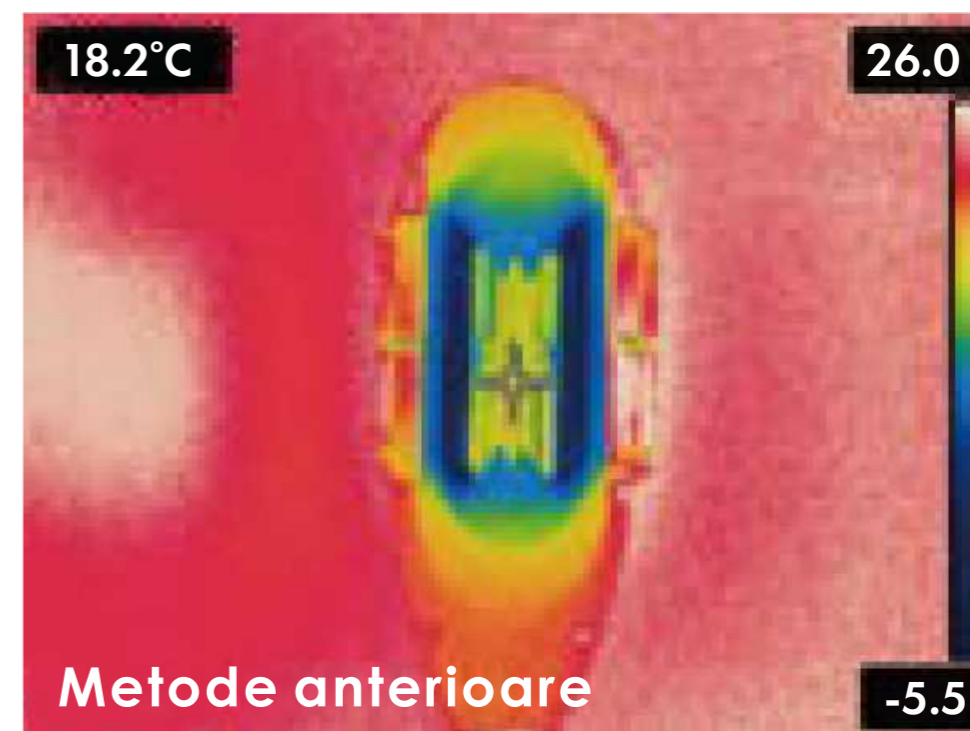

# BENEFICIILE TRATAMENTULUI

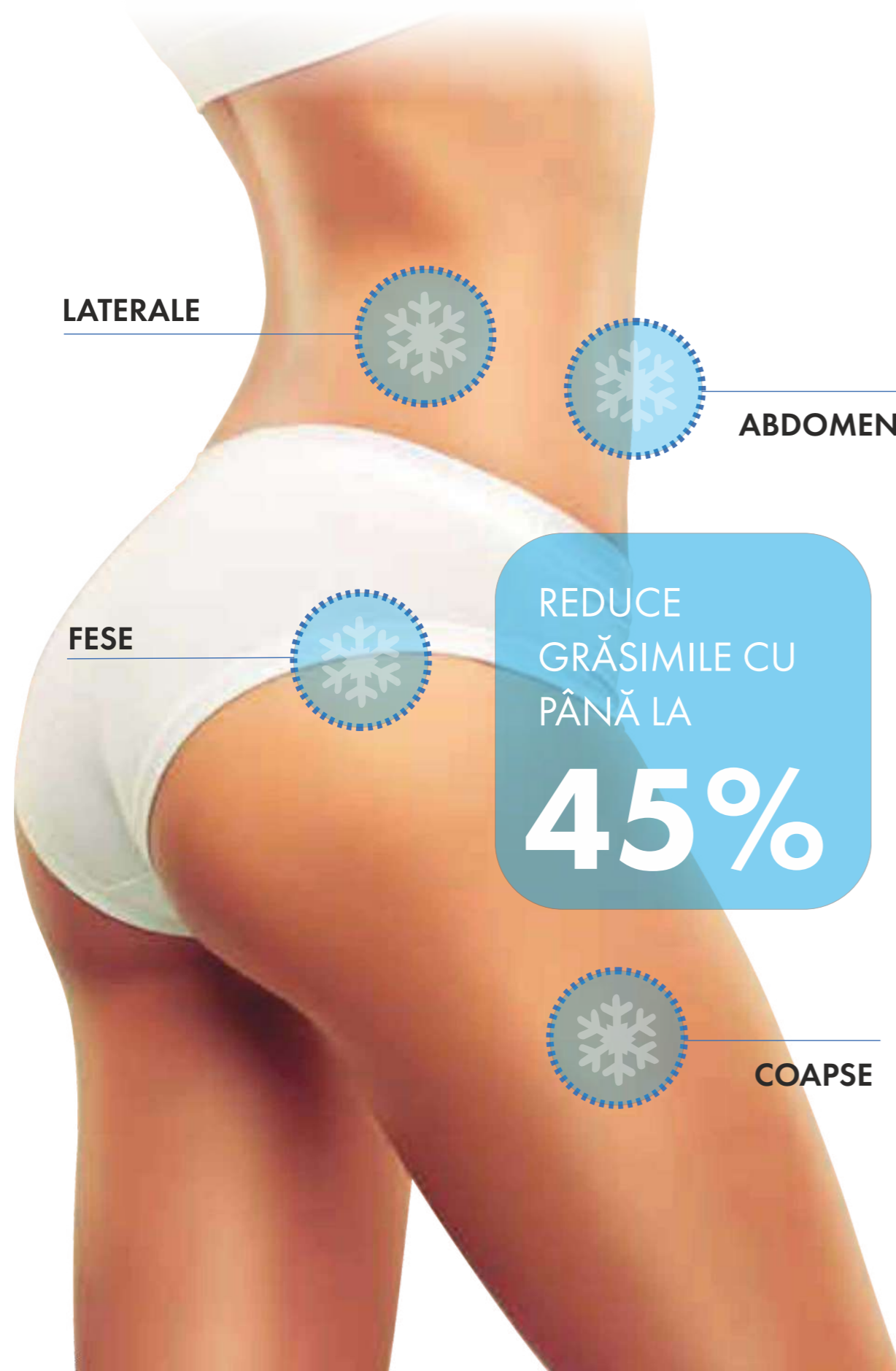

REDUCE  
GRĂSIMILE CU  
PÂNĂ LA  
**45%**

- Este foarte eficient în reducerea grăsimii corporale.
- Ajută la reducerea celulitei.
- Ne-dureros și non-invaziv.
- Poate fi aplicat pe orice zonă a corpului.
- Țesutul adipos este eliminat în mod natural, în decurs de 2 luni de la urmarea tratamentului.
- Sculptează și subțiază o serie de zone problematice ale corpului.
- Rezultate vizibile în doar 15 zile de la prima ședință.
- Tratamente presetate cât și servicii personalizate.

## Este necesar timpul de recuperare?

Fiind un tratament neinvaziv, procedura CryoSculpt permite reintegrarea imediată al clientului în viață de zi cu zi.

## Versabilitate în funcție de zona de tratat

Capetele de tratament cu forme și caracteristici diferite asigură siguranța metodei și oferă rezultate eficiente, datorită senzorilor care monitorizează în permanență puterea de sucțiune și temperatura la nivelul pielii.

# ZONE DE TRATAMENT



# TERAPII COMBINATE

Pentru a eficientiza și mai bine efectele tratamentelor de remodelare corporală cu CryoSculpt, se recomandă combinarea terapiilor și a tratamentelor corporale.

## RECOMANDAREA NOASTRĂ:

- CryoSculpt + Laser lipolitic (Eximia HR77 Platinum).
- CryoSculpt + Drenaj limfatic.
- CryoSculpt + Împachetări corporale la rece.
- CryoSculpt + Vacuum.

## STEP BY STEP

**PASUL 1:** Pentru a arăta în mod obiectiv rezultatele obținute, pe măsură ce tratamentul avansează, și pentru a monitoriza în mod corect progresul pacientului, este recomandat a se înregistra măsurători ale fiecărei zone ce se dorește a fi tratată.

**PASUL 2:** Înainte de aplicarea capatului de tratament, este necesar să se folosească o membrană de tratament pentru a proteja epiderma de efectele negative ale temperaturilor la care este supusă în timpul tratamentului. Măștile de tratament sunt îmbibate cu un gel special formulat cu principii active.

**PASUL 3:** După ce setările ședinței de tratament au fost introduse în aparat (grosimea zonei care trebuie tratată, temperatura programată, timpul de tratament și presiunea), aplicați capul de tratament dorit pe zona care urmează a fi tratată.



# BENEFICII PRINCIPALE



## SISTEM DE CONTROL ANDROID



Sistemul Android permite controlul aparatului inclusiv de pe telefonul mobil, facilitând operarea și îmbunătățind eficiența în utilizare.

## MOD DE OPERARE AUTOMAT

Ecranul de 15,6 inch poate fi ridicat și rotit automat printr-un singur buton. Suportul retractabil pentru braț oferă un design ergonomic, practic și elegant.

- ◆ Ecran Android inteligent
- ◆ Monitor 4K HD
- ◆ Display 15,6"
- ◆ Design premium

## SPECIFICAȚII TEHNICE

**Lumină infraroșie:** 37 ~ 42°C

**Temperatură de criodelare:** 5 ~ -11°C

**Vacuum:** 10 - 80 KPa

**LED:** Roșu (630 nm), Verde (570 nm), 50mW × 4

**Dimensiuni aplicatori:** 7 dimensiuni interschimbabile

**Sistem de răcire:** aer + apă

**Alimentare:** AC220V 50Hz / AC110V 60Hz

**Dimensiuni ambalaj:** 130 × 66 × 51 cm, 56 kg

**Temperatură de funcționare:** +15 ~ +30°C

**Temperatură de depozitare:** -20 ~ +55°C

**Umiditate relativă:** ≤80%

**Presiune atmosferică:** 86 - 106 kPa

ECRAN ROTATIV 90°



# REZULTATE DOVEDITE



Barbie dublă



Înainte



După

Mandibulă



Înainte




După

Brațe



Înainte

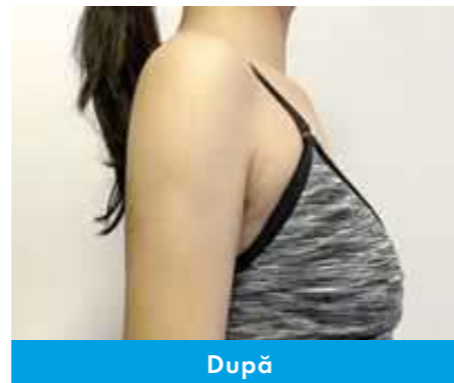


După

Abdomen



Înainte

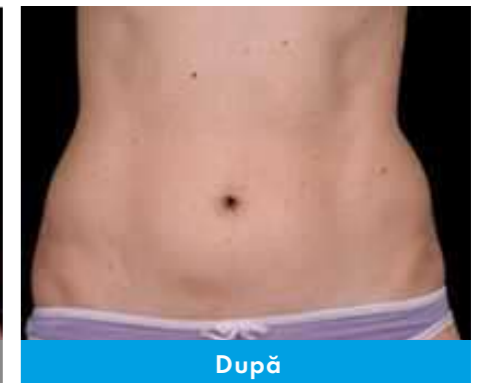


După

Zona flancurilor



Înainte

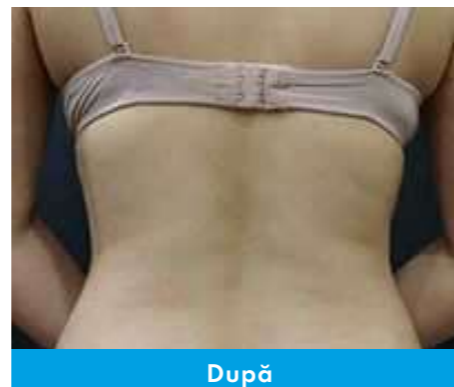


După

Fese



Înainte

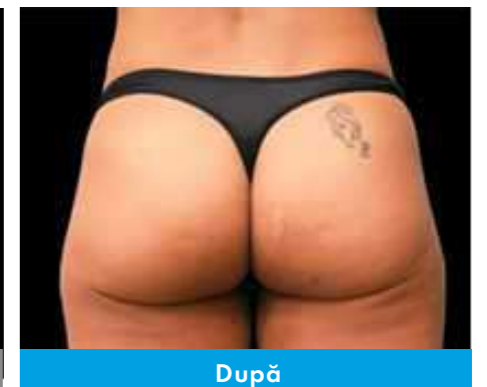

După

Flancuri laterale



Înainte




După

Șolduri



Înainte

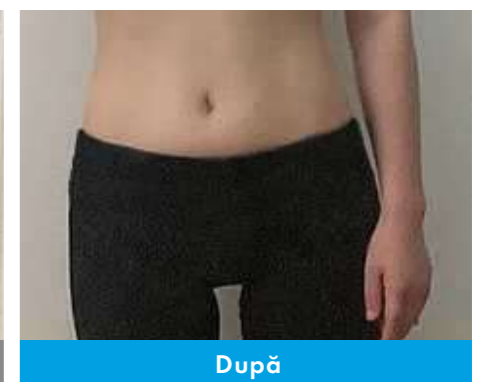

După



# CRYO SCULPT



**Adresă:** Str. 11 Iunie, Nr. 59, Sector 4, București • **Telefon:** 0729.005.777 • **E-mail:** office@beoneconcept.ro

  **BEAUTYONEROMANIA**  **WWW.BEAUTYONE.RO**